

Ohutletkukojeen käyttö ja huolto



Kuulokojeen käyttö ja huolto

Kuulokojeet on merkitty värikoodein: **PUNAINEN** = oikea korva **SININEN** = vasen korva

Kuulokojeen painikkeiden määrä vaihtelee kuulokojemallin mukaan. Painikkeella voi olla useita toimintoja, tai se ei ole käytössä. Tämä määräytyy kojeen ohjelmoinnin mukaan, mikä on merkitty kojeen ohjeisiin.

Paristokotelo toimii virtakytkimenä. Kun paristokotelo on kiinni, koje on päällä. Kun paristokotelo on auki, koje on pois päältä.

Kojetta ei saa jättää kovaan auringon paisteeseen, eikä saa mennä saunaan, suihkuun tai uimaan kuulokoje korvassa. Itse kuulokojetta ei saa koskaan pestä. Älä laita hiuslakkaa, hyttyssumutteita tai muita suihkutettavia aineita kuulokojeen ollessa korvassa. Magneettitutkimuksiin kuulokoje on otettava pois.

Korvaan laitto

Aseta kuulokoje korvasi taakse ja ota letku mutkan kohdalta (vihreä nuoli) peukalosi ja etusormesi väliin (kuva 1). Aseta tippi/mikrokorvakappale tarpeeksi syvälle korvakäytävään (kuva 2).

Kuva 1.



Kuva 2.



Pariston vaihto

Pariston kestoikä riippuu pariston koosta. Kuulokeskuksessa käytetään 312, 13 paristolla toimivia kojeita. Pariston kesto on suunnilleen 1–2 viikkoa.

Poista uudesta paristosta suojateippi ja anna pariston ilmastoitua noin pari minuuttia. Laita paristo + puoli ylöspäin paristokoteloon.

Ohutletkukojeen huolto

Pyyhi kuulokoje päivittäin pehmeällä kuivalla kankaalla puhtaaksi.


Silikonitippi/kuorikko pyyhitään päivittäin kuivalla liinalla.

Silikonitippi vaihdetaan uuteen tarpeen mukaan, viimeistään 3kuukauden välein.

Jos ohutletkussa tai mikrokorvakappaleen äänikanavan aukossa näkyy korvavahaa tai kosteutta, irrota letku kuulokojeesta ja vie puhdistussiima letkun läpi. Puhdistuksen jälkeen kiinnitä letku takaisin kuulokojeeseen.



Ohutletku on vaihdettava uuteen, jos se on kovettunut, särkenyt tai jos on tullut värimuutosta. Irrota letku kuulokojeesta ja irrota silikonitippi/mikrokorvakappale letkusta. Vaihda letku uuteen ja kiinnitä se kuulokojeeseen sekä tippiin/mikrokorvakappaleeseen.

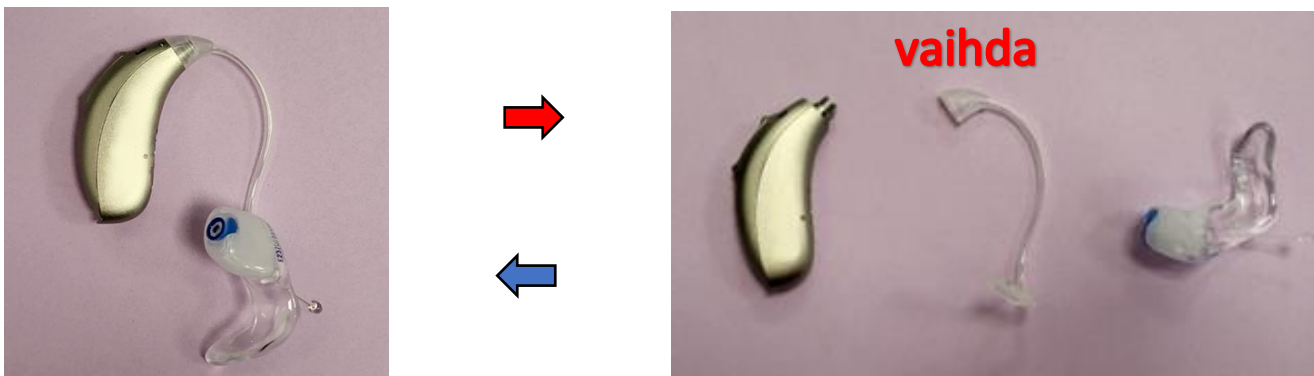

Puhelimen kuuntelu



Nosta puhelin kuulokojeen yläpuolelle kuulokojeen päälle. Puhelimen ääni kuuluu kuulokojeen mikrofonin avulla korvaan. Etsi asento, missä kuuluvuus on parhain.

Monissa kojeissa onnistuu nykyään myös suoratoisto.

Induktiivinen kuuntelu

Jos kuulokojeeseesi on ohjelmoitu induktiosilmukkaohjelma, voit hyödyntää sitä niissä paikoissa, joihin on induktiosilmukka asennettu esim. kirkot, teatterit ym.

Vahvistin ilmaistaan näissä tiloissa T-merkillä:



kuva: Kuuloliito Ry

Vianetsintä

Jos alla mainittujen toimenpiteiden jälkeen koje ei toimi, sitä voi lähettää kuulokeskukseen huoltoon. Pakkaa huolellisesti ja laita mukaan yhteystietosi sekä mikä kojeessa on vikana. Vikailmoituskaavake voi tulostaa kuulokeskuksen nettisivulla olevasta linkistä.

Koje mykkä

- Paristokotelo auki -> sulje paristokotelo
- Paristo tyhjä -> vaihda uuteen
- Mikrokorvakappale/ohutletku tukossa -> puhdistu

Ääni hiljainen

- Voimakkuudensäädin liian pienellä -> suurennu voimakkuutta
- Mikrokorvakappale/ohutletku lähes tukossa -> puhdistu
- Kuulo heikentynyt -> yhteys kuulokeskukseen
- Korvakäytävässä vahaa -> puhdistus esim. terveyskeskuksessa

Koje vinkuu

- Tippi/mikrokorvakappale huonosti korvassa -> laita uudestaan
- Mikrokorvakappale väljä -> yhteys kuulokeskukseen
- Murtuma ohutletkussa -> vaihda uuteen
- Ohutletku kovettunut -> vaihda uuteen
- Korvakäytävässä vahaa -> puhdistus esim. terveyskeskuksessa

Ääni katkoo/ ääni säröytyy

- Heikko paristo -> tarkista/vaihda uuteen
- Kuulokoje rikki -> yhteys kuulokeskukseen

Yhteystiedot

Kuulokeskuksen puh. (014) 269 1322

Soittoaika (takaisinsoitto): Ma - Pe klo 8:00 – 14:00

Kuulokeskuksen nettisivulta voit ottaa yhteyttä myös chatin kautta kirjoittamalla. Chat on avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–14.

Ajanvaraus ja jonotiedustelut

puh. (014) 269 1822

Ma-Pe klo 8:00-14:00

Osoite

NOVA apuvälinepalvelupiste

Sairaala NOVA

Hoitajantie 3

40620 JYVÄSKYLÄ